


Bima kildynor

Används för att få ett något framåttippat bäcken vilket medför en ergonomisk riktig sittställning. En kildyna kan även användas efter en höftledsoperation, för att öppna upp höftledsvinkeln.

OBS! Ska inte användas i bilsäte eftersom det finns risk för underglidning vid kollision. I vårt sortiment finns en särskild kildyna anpassad för bilsäte, art.nr B350.

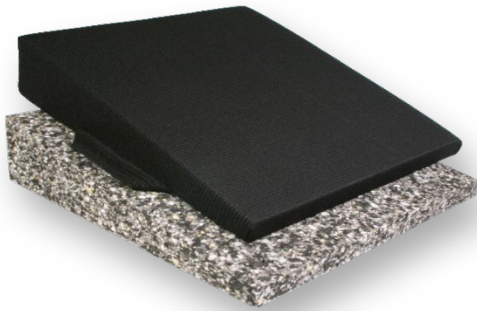

- ✓ Flertal storlekar och modeller
- ✓ Överdragets tvärgående ribbning motverkar glidning framåt
- ✓ Stadig dynbas



Kildyna Radner, ger ökad rörlighet för benen.



Kildyna för köksstol.

Konstruktion

Dynbasen tillverkas av regenererad polyeter 100kg/m³. De fyrkantiga kildynorna är försedda med ett bärhandtag. Kildyna för köksstol har knytband.

Överdrag

Slitstarkt överdrag av svart polyester manchester med ribbning som motverkar glidning framåt.

Rekonditionering

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Dynbasen klarar även att ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling

Art.nr	Modell/ mått	Max brukarvikt
B30030	Kildyna 30x30x3/1cm	90kg
B30035	Kildyna 35x30x5/1cm	90kg
B300	Kildyna 38x38x6/1cm	125kg
B300-2	Kildyna 38x38x6/2cm	125kg
B301	Kildyna 38x38x8/1cm	125kg
B302	Kildyna 38x38x10/1cm	125kg
B306	Kildyna 40x40x3/1cm	125kg
B303	Kildyna 40x40x6/2cm	125kg
B304	Kildyna 40x40x8/2cm	125kg
B305	Kildyna 40x40x10/2cm	125kg
B7016	Kildyna 40x43x6/2cm	125kg
B7018	Kildyna 40x43x10/2cm	125kg
B7026	Kildyna 45x43x6/2cm	140kg
B7028	Kildyna 45x43x10/2cm	140kg
B30345	Kildyna 45x45x6/2cm	140kg
B30445	Kildyna 45x45x8/2cm	140kg
B30350	Kildyna 50x50x6/2cm	150kg
B30450	Kildyna 50x50x8/2cm	150kg
B308	Kildyna för köksstol 39x36x5/2cm	125kg
B3087	Kildyna för köksstol 39x36x7/2cm	125kg
B3089	Kildyna för köksstol 39x36x9/2cm	125kg
B3050	Kildyna Radner 42x33x5/2cm	125kg
B3070	Kildyna Radner 42x33x7/2cm	125kg
B3090	Kildyna Radner 42x33x9/2cm	125kg

Fakta

Klassificering: Kildynor ISO-kod 181006

Dynor för positionering

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Material i dynbas: Regenererad polyeter
100kg/m³

Material i överdrag: Svart FR polyester
manchester

BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950

info@bimaplastteknik.se

www.bimaplastteknik.se