

# NordBed™ Optimo Familjen



ERGOMOVE™ TECHNOLOGY  
FRÄMJAR MOBILISERING OCH SJÄLVSTÄNDIGHET



NordBed Optimo familjen erbjuder de idealiska sängarna för hemvårdsmiljöer. Med **hög komfort** och **enkel hantering**, skapar NordBed Optimo möjlighet för både mobilisering och självständighet. ErgoMove technology, sätter tryckavlastning i fokus. NordBed Optimo 90 är enkel att hantera, såväl för brukaren som för vårdpersonalen. NordBed Optimo Wide erbjuder extra plats för stora brukare och de som behöver extra utrymme i samband med lägesändring i sängen.

## ErgoMove technology

---

Invacare NordBed Optimo kommer med ErgoMove technology som förflyttar brukaren på ett behagligt sätt från liggande till en **aktivt sittande position** med endast ett knapptryck. Brukaren får en optimal position för att äta, dricka och läsa, samtidigt som bra tryckfördelning möjliggörs.

Rörelsesekvensen bidrar till att brukaren förblir i rätt position och inte glider ner mot fotänden. Detta, kombinerat med den inbyggda ryggtillbakaföringen **minskar skjuv markant** i samband med att brukaren förflyttas till sittande position.



### Up-and-Out™

---

För en **säker och smidig** förflyttning ur säng som möjliggör självständighet och mobilisering kan brukaren med ett enkelt knapptryck aktivera Up-and-Out funktionen. Sängens rörliga delar anpassar sig då automatiskt till lämplig position för förflyttning ur säng. Rörelsen är **optimerad för att minimera skjuv**.



# 6

## EXKLUSIVA FUNKTIONER

1

### ErgoMove technology

- ▶ Förflyttar på ett behagligt sätt brukaren från liggande position till aktivt sittande

2

### Enkel hantering

- ▶ Enkel att montera isär för transport och förvaring

3

### Flera storlekar

- ▶ Finns i bredderna 90, 105 och 120 cm



4

### Up-and-Out

- ▶ Erbjuder säker och smidig förflyttning ur säng

6

### Optimerad indelning av sängbotten

- ▶ Baserad på antropometriska mått för ökad komfort

5

### Design

- ▶ Erbjuder flera olika moderna sänggavlar i träfinish eller färg


## Ytterligare funktioner

- ▶ **RememberMe™:**
  - Programmerbar manöverdosa
  - ErgoMove och Up-and-Out kan anpassas till individuella behov
- ▶ **Integrerad förlängningsbar sängbotten**
  - Ytterligare 10 cm i huvud- respektive fotände möjliggör anpassning till olika behov
- ▶ **Anti-Trendelenburg och Trendelenburg som tillval**
  - Underlättar för vårdpersonal vid förflyttning i säng
  - Smidig tryckavlastning
- ▶ **Belysning under sängen**
  - Enkelt att sätta på belysningen
  - För fallprevention/säkerhet

---

## Nyckelfunktioner och fördelar

---

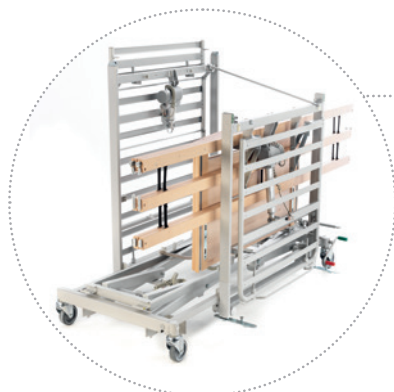

### ◀ Enkel hantering

NordBed Optimo 90 och 105 cm kan monteras isär i fem delar. När Optimo 90 har delats väger ingen del mer än 24 kg, vilket möjliggör enkel hantering. NordBed Optimo är därmed smidig att leverera och kan transporteras av en person genom trånga korridrer och i trappor. Att montera och demontera NordBed Optimo är enkelt och intuitivt, sängen kan demonteras och placeras på sin egen bas för att enkelt förflyttas från bilen till sovrummet. NordBed Optimo 120 cm kan demonteras i tre delar och placeras på en sängvagn för enkel transport.



### ◀ Idealisk för rekonditionering

NordBed Optimo familjen kan beroende på utförande rengöras i tvättanläggning.






### ◀ Manöverdosa

- De funktioner som brukaren använder mest frekvent har färger som tagits fram i samarbete med experter och som är enkla att identifiera
- För att underlätta för brukaren lyser respektive knapp upp när en funktion är vald, detta ger tydlighet dag som natt
- För enkel hantering är huvudknapparna placerade överst på manöverdosan och justering görs genom att trycka på upp/ner knapparna
- Manöverdosan är låsbar som standard

# Introduktion av **NordBed Optimo** familjen







**NordBed Optimo finns i tre olika utföranden och med olika brukarvikt och bredd för varierande behov och hemmiljöer**





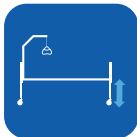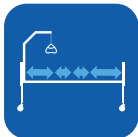

	Nedmonterbar i:	Max brukarvikt:	Produktens tyngsta del:
<p><b>Nordbed Optimo 90</b> <i>Främjar mobilisering och självständighet</i></p> 	5 delar	200 kg	20 kg
<p><b>Nordbed Optimo 105</b> <i>Bredare för brukare som behöver ytterligare utrymme vid lägesändring i säng</i></p> 	5 delar	200 kg	25 kg
<p><b>Nordbed Optimo 120</b> <i>Extra komfort för den större brukaren</i></p> 	3 delar	250 kg	70 kg

Ett antal konfigurationer finns tillgängliga för att möta behoven både hos brukare och vårdare.

## Tekniska data ▼


Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

	 Yttermått Innermått ▼	 Ytterlängd/ Innerlängd ▼	 Lyftintervall ▼	 Sängbottenindelning ▼	 Frigång under sängen ▼	 Lårdelsvinkel ▼
<b>NordBed Optimo 90</b>	100 / 90 cm	213 / 200 cm	32 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	49°
<b>NordBed Optimo 105</b>	115 / 105 cm	213 / 200 cm	32 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	49°
<b>NordBed Optimo 120</b>	130 / 120 cm	213 / 200 cm	32 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	49°

	 Bendelsvinkel ▼	 Anti-Trendelenburg / Trendelenburg ▼	 Max. brukarvikt ▼	 Total vikt utan sänggavlar ▼	 Tyngsta separata del ▼	 Kan maskintvättas ▼
<b>NordBed Optimo 90</b>	19°	+/- 15°	200 kg	100 kg	24 kg	Ja
<b>NordBed Optimo 105</b>	19°	+/- 15°	200 kg	100 kg	26 kg	Ja
<b>NordBed Optimo 120</b>	19°	+/- 15°	250 kg	130 kg	70 kg	Ja

**Viktigt:** Sängen skall inte användas av brukare under 12 år, eller av brukare vars kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre utan att en individuell dokumenterad utprovning sker av eventuella risker.

## Ramfärg ▼

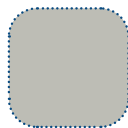

Aluminiumgrå

## Träfärg ▼



Bok



Ek



Umbr



Bok/  
ljusblå



Ljusblå



Vit

**Kundservice: 08-761 70 90**

Fax 08-761 81 08  
sweden@invacare.com  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden



**Yes, you can.®**